

Infectiepreventie

Instructie afnemen MRSA-kweken

Contactgegevens Alrijne Ziekenhuis

Alrijne Ziekenhuis Leiden
Houtlaan 55
2334 CK Leiden
071 517 8178

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp
071 582 8282

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
2401 WC Alphen aan den Rijn
0172 467 467

U heeft een brief gekregen. Hierin vragen wij u om MRSA-kweken bij uzelf af te nemen. In deze folder leest u hoe u dit doet.

Let op: kweken mogen alleen worden afgenomen als u geen antibiotica gebruikt of in de afgelopen 48 uur heeft gebruikt.

MRSA-kweken

Bij MRSA-kweken worden kweken afgenomen van keel, neus en perineum (gebied rond de anus).

U heeft hiervoor 3 kweekstokjes nodig. U krijgt 1 kweekstokje extra voor eventuele kweken van wonden en/of huidbeschadigingen.

In deze folder vindt u alle informatie.

Handleiding

In de (blauwe) kunststof retourenvelop zitten:


- 1 x plastic zakje,
- 1 x wit velletje,
- 4 x kweekset met wattenstokken en kweekbuisjes gevuld met kweekmedium,
- 4 x sticker met persoonsgegevens.



Open de verpakking van de kweekset.



Verwijder voordat u de kweek afneemt de dop van de buis met het kweekmedium.

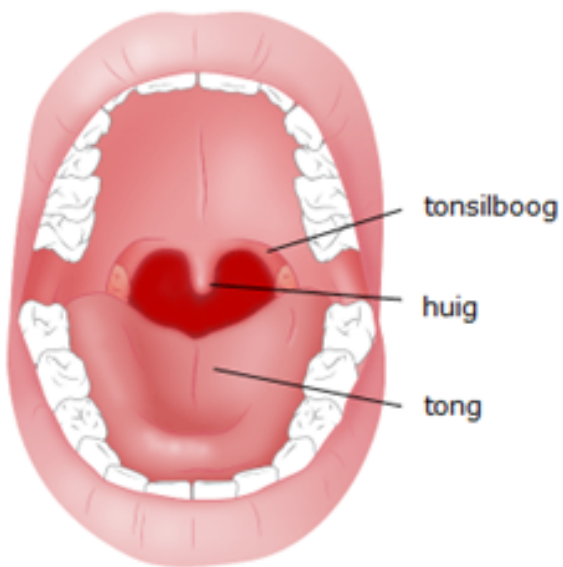

Keelkweek

Neem de keelkweek af: strijk met 1 wattenstok over de beide (tonsillen)bogen achterin de keel.

Doe daarna het wattenstokje in het kweekmedium.



Plak de sticker op de buis. Schrijf de afnamedatum op de sticker.



Neuskweek

- Open een nieuwe verpakking zoals hierboven is beschreven.
- Haal het dopje van de buis af.
- Neem de neuskweek af: strijk met 1 wattenstok stevig langs de binnenkant van beide neusvleugels (neuspeutergebied).
- Doe het wattenstokje in het kweekmedium.
- Plak de sticker op de buis. Schrijf de afnamedatum op de sticker.

Perineumkweek

- Open een nieuwe verpakking zoals hierboven is beschreven.
- Haal het dopje van de buis af.
- Neem de perineumkweek af: strijk met 1 wattenstok over de huid rondom de anus, en de huid tussen anus en scrotum of tussen anus en vagina.
- Doe het wattenstokje in het kweekmedium.
- Plak daarna de sticker op de buis. Schrijf ook de afnamedatum op de sticker.

Neem ook de andere kweken af, als dat nodig is.

Heeft u wonden en/of huidbeschadigingen (bijvoorbeeld eczeem)? Gebruik dan voor elke wond/huidbeschadiging een apart wattenstokje.

Hiermee strijkt u door/over de huid, wond of wondkorsten.

Schrijf op de sticker van welke wond/huidbeschadiging het materiaal af komt! Schrijf ook de afnamedatum op de sticker.

Heeft u meer kweekstokjes nodig? Neem dan contact op ons op via het telefoonnummer dat in de brief staat.

Versturen



Rol het witte velletje om de buisjes.



Doe de kweekbuisjes met het witte velletje eromheen in het plastic zakje.



Verwijder de strip die aan de bovenkant van het zakje zit. Plak het zakje dicht.



Vul de afnamedatum van de kweken in op het (witte) aanvraagformulier (zie -> op het formulier).

Gebruikt u antibiotica? Vul dat dan ook in.

Doe het dichtgeplakte zakje en het aanvraagformulier voor het laboratorium in de blauwe retourenvelop. Maak de envelop dicht met de plakstrip.

De retourenvelop kunt u nu in de brievenbus doen. Een postzegel is niet nodig. Belangrijk: de kweek moet binnen 72 uur na afname op het laboratorium zijn!

LET OP: in verband met de bezorgdagen van de post op het laboratorium, verzoeken wij u dit pakket alleen retour te zenden op maandag t/m donderdag.

U kunt de retourenvelop ook op werkdagen bij ons inleveren:

Alrijne Ziekenhuis Leiden, poli laboratorium, route 32, tussen 8.00 en 17.00 uur (dinsdag tot 20.00 uur).

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, poli laboratorium, route 130, tussen 7.30 en 16.30 uur.

Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, polilaboratorium, route 32, tussen 7.30 en 16.30 uur.

Hartelijk dank voor uw medewerking.